

SKIVEL – User manual

TRIVEL

The Skivel is designed to let you enjoy winter with friends, or with a wheelchair-bound patient. The secure attachment system and sturdy handle ensures you are always in full control of your movements. Made to be used on groomed snow.

WARNING



- Slow down before turning to avoid tipping over.
- Use exclusively on flat, snow-covered surfaces.
- Do not use on steep inclines as the Skivel and wheelchair could tip.
- Do not use on uneven sidewalks or near stairs.
- Each quick release that holds the Skivel frame in place once adjusted must be securely tightened.

1. Place the Skivel on a flat surface. Loosen the quick release handle at the base of the handlebar. Position the handle in the best possible position for the user to push and retighten the quick release to hold it in place.



2. Measure the inside tires width of the wheelchair that will be used.



3. Use the eight quick releases handles to adjust the width of the Skivel to the inside width of the wheelchair wheels.



4. Adjust the distance between the rollers with an Allen key if necessary. They must hold the wheelchair in place and prevent it from moving.



Before use:

- Make sure wheelchair wheels are locked before moving.
- The wheels of the wheelchair must be in the center of the skis.
- The wheelchair must face away from the handlebar.
- Maximum total weight capacity is 400lbs/182Kg.
- Do not leave a user on the Skivel unattended.

Feel free to contact us at 1-877-687-7676, if you need assistance with your Skivel.



Le Skivel est conçu pour vous permettre de profiter de l'hiver entre amis ou avec un patient en fauteuil roulant. Le système de fixations sécurisées et la poignée robuste vous permettent de toujours garder le contrôle total de vos mouvements. Conçu pour être utilisé sur neige tapée.

AVERTISSEMENT



- Ralentissez avant de tourner pour éviter de basculer.
- Utiliser exclusivement sur des surfaces planes et enneigées.
- Ne pas utiliser sur des pentes raides car le Skivel et le fauteuil roulant pourraient basculer.
- Ne pas utiliser sur des trottoirs inégaux ou à proximité d'escaliers.
- Chaque blocage rapide qui maintient le cadre Skivel en place une fois ajusté doit être bien serré.

1. Placez le Skivel sur une surface plane. Desserrez la poignée de dégagement rapide à la base du guidon. Positionnez la poignée dans la meilleure position possible pour que l'utilisateur puisse pousser et resserrer le blocage rapide pour le maintenir en place.




2. Mesurez la largeur intérieure des pneus du fauteuil roulant qui sera utilisé.



3. Utilisez les huit poignées à dégagement rapide pour ajuster la largeur du Skivel à la largeur intérieure des roues du fauteuil roulant.



4. Ajustez la distance entre les rouleaux avec une clé Allen si nécessaire. Ils doivent maintenir le fauteuil roulant en place et l'empêcher de bouger.

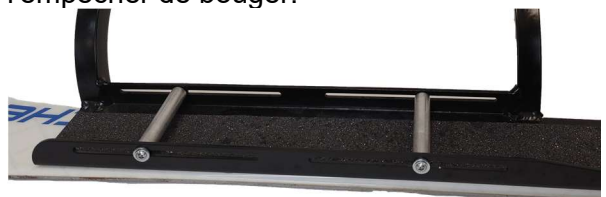

Avant utilisation :

- Assurez-vous que les roues du fauteuil roulant sont verrouillées avant de vous déplacer.
- Les roues du fauteuil roulant doivent être au centre des skis.
- Le fauteuil roulant doit être orienté à l'opposé du guidon.
- La capacité de poids total maximum est de 400 lb/182 kg.
- Ne laissez pas un utilisateur sur le Skivel sans surveillance.

N'hésitez pas à nous contacter au 1-877-687-7676, si vous avez besoin d'assistance avec votre Skivel.

